



## Equipo: VISULAS 690

Descripción del Mantenimiento Preventivo a realizar en cada visita.


### Limpeza Alineación y Calibración en la Consola Láser.

- Verificar que al encender el equipo, este llegue al Menú Principal
- Verificar el funcionamiento de las Teclas del Panel
- Verificar que el anillo del VISULINK se mueva libremente
- Verificar que el tamaño del Spot varia en el Panel de Control al mover el anillo del VISULINK
- Verificar que la variación de la Intensidad del Aiming Beam
- Alineación del Visulink
- Calibración de la Potencia de Salida
- Verificar la transmisión de la Guía de Luz
- Limpieza de la Consola Láser

### Limpeza y Revisión en la Lámpara de Hendidura (LASER SLIT LAMP, LSL).

- Limpieza de Oculares.
- Limpiar y Revisar el movimiento de los brazos del Tubo Binocular.
- Limpiar y Revisar los selectores de Filtros, Hendidura y Magnificaciones.
- Limpiar y Revisar Frenos y Sistemas de Movimiento de LSL.
- Limpiar Prisma Láser

Precios Sujetos a cambio sin previo aviso.

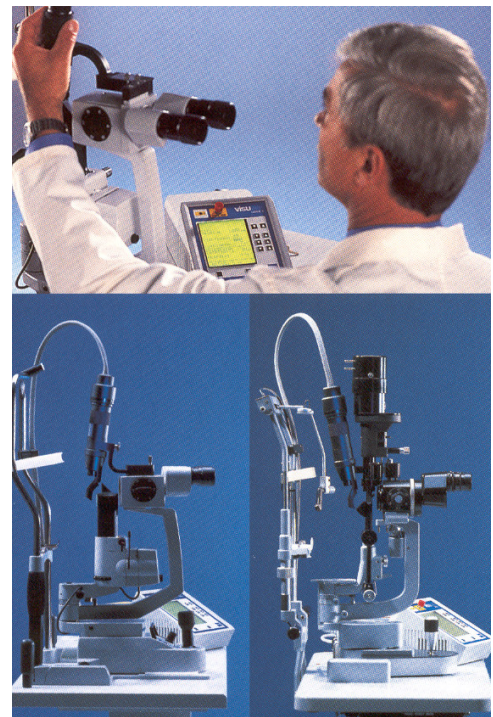

VISULAS 690's



## **Lista de Accesorios no incluidos en ningun tipo de contrato**

Cámaras de video, Sony, Panasonic, etc.

Monitores de video, Sony, Panasonic, etc.

Impresoras: Laser y de Inyección de Tinta, HP, Cannon, etc.

Video Impresoras

Cámaras Fotográficas: Cannon, Pextax, etc.

## **Si desea mas información favor de contactarnos:**

Contacto	Teléfono	e-mail
Lic. Gabirela Valenzuela	( 01-55 ) 59 99 02 37	<a href="mailto:g.valenzuela@zeiss.org">g.valenzuela@zeiss.org</a>
Lic. Gabriela Gutierrea	(01-55 ) 59 99 02 37	<a href="mailto:g.gutierrez@zeiss.org">g.gutierrez@zeiss.org</a>
Ing. Joel Zaldívar	( 01-55 ) 59 99 03 40	<a href="mailto:zaldivar@zeiss.org">zaldivar@zeiss.org</a>