

Equipo: VISULAS YAG III

Descripción del Mantenimiento Preventivo a realizar en cada visita.

Inspección de Seguridad del Equipo:

- Revisión del Footswitch y/o Hand Switch
- Revisión de funcionamiento del Interlock
- Revisión del Botón LASER STOP
- Revisión del Rayo Guía (Aiming Beam)
- Revisión del Medidor de Energía del YAG
- Medición de la Transmisión de del Láser
- Medición de la Fuerza de Choque del Láser en el Aire (Breakdown)


Calibración y alineación del Equipo

- Alineación del Láser YAG con el Rayo Guía
- Medición y Alineación del Punto de Enfoque
- Calibración del YAG Láser
- Calibración y Alineación del Rayo Guía (Aiming Beam)

Limpieza y Revisión en la Lámpara de Hendidura (LASER SLIT LAMP, LSL).

- Limpieza de Oculares.
- Limpiar y Revisar el movimiento de los brazos del Tubo Binocular.
- Limpiar y Revisar los selectores de Hendidura y Magnificaciones.
- Limpiar y Revisar Frenos y Sistemas de Movimiento de LSL.
- Limpiar Lente Láser.

VISULAS YAG II plus

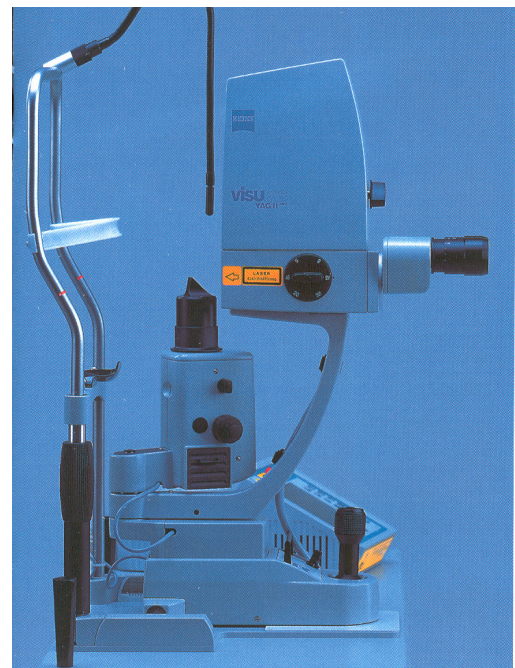



Lista de Accesorios no incluidos en ningun tipo de contrato

Cámaras de video, Sony, Panasonic, etc.

Monitores de video, Sony, Panasonic, etc.

Impresoras: Laser y de Inyección de Tinta, HP, Cannon, etc.

Video Impresoras

Cámaras Fotográficas: Cannon, Pextax, etc.

Si desea mas información favor de contactarnos:

Contacto	Teléfono	e-mail
Lic. Gabirela Valenzuela	(01-55) 59 99 02 37	g.valenzuela@zeiss.org
Lic. Gabriela Gutierrea	(01-55) 59 99 02 37	g.gutierrez@zeiss.org
Ing. Joel Zaldívar	(01-55) 59 99 03 40	zaldivar@zeiss.org